


CUNA TÉRMICA

A4051+

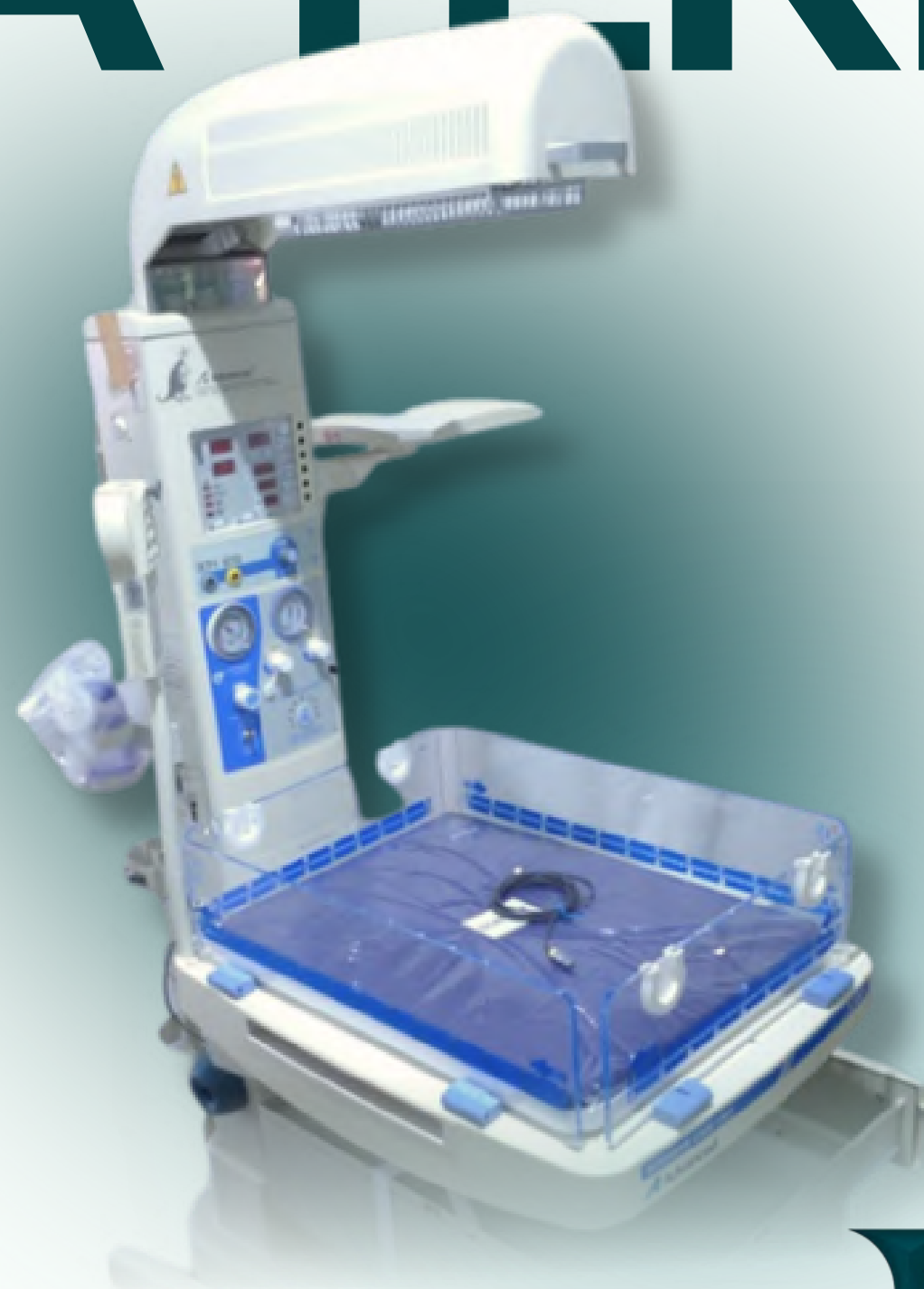


EQUIPOS Y SUMINISTROS DE NEONATOLOGÍA

DELTA®
Equipo y Mobiliario Médico

Advanced
Instrumentations

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE TERMORREGULACIÓN NEONATAL CON CALENTADOR RADIANTE DE CUARZO INFRARROJO Y CONTROL DIGITAL LED. IDEAL PARA CUNERO FISIOLÓGICO, ÁREA DE TRANSICIÓN PORT-PARTO, OBSERVACIÓN DE NEONATOS TÉRMINO ESTABLES.

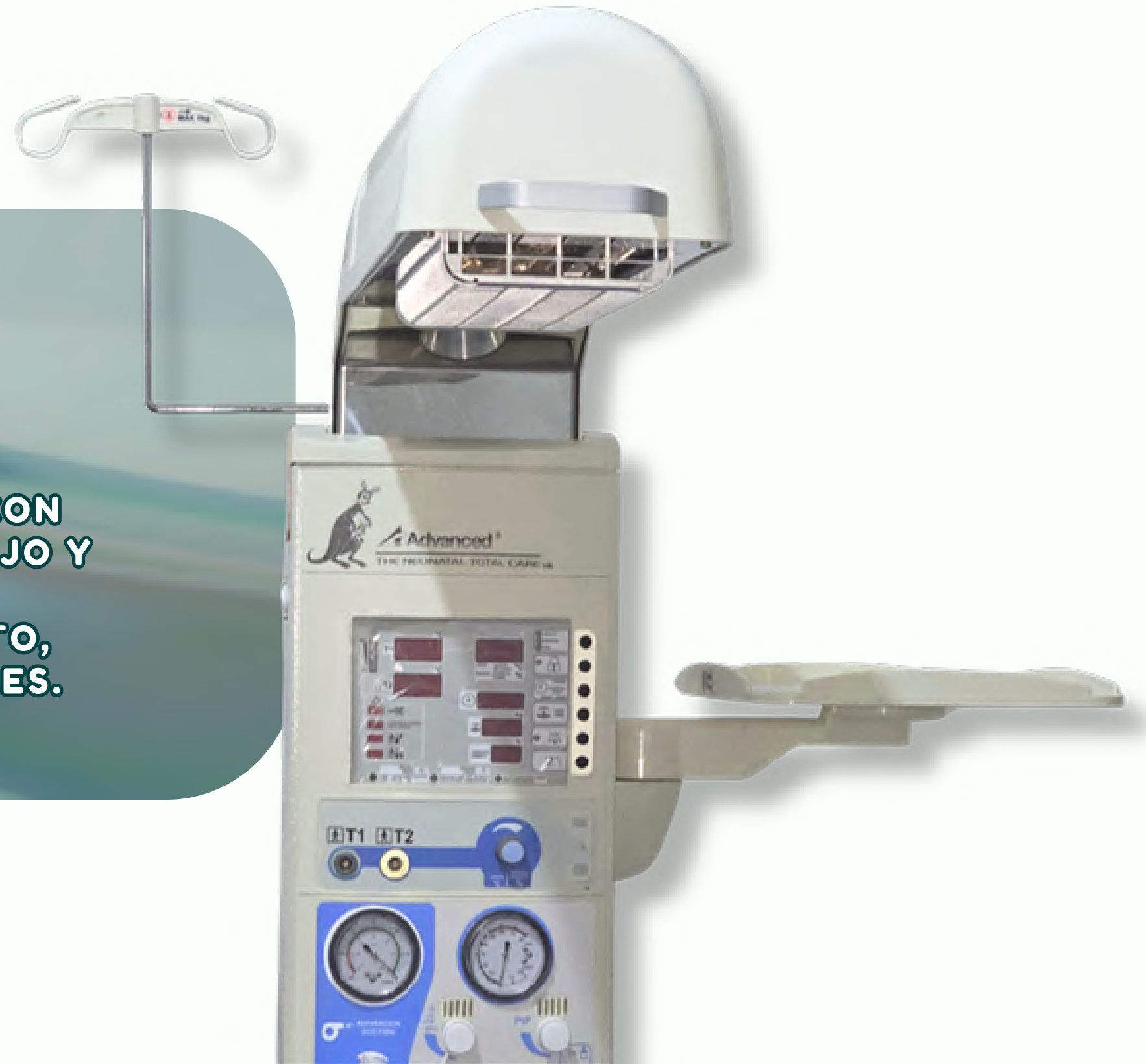

MODOS DE CONTROL TÉRMICO

SERVO-CONTROL AUTOMÁTICO

Ajuste automático de potencia en el calefactor para mantener una temperatura cutánea constante.

- **Rango:** 25.0°C a 38.0°C
precisión $\pm 0.2^\circ\text{C}$.
- **Resolución** display: 0.1°C.
- **Uso:** Operación estándar continua (95% del tiempo).

MANUAL

Control directo del nivel del calefactor.

Potencia fija
(no varía con temperatura del paciente).


- **Uso:** Situaciones como re colocación de sensor, hipotermia severa con protocolo de recalentamiento gradual supervisado.
- **Requiere:** monitoreo manual.

PRE-CALENTAMIENTO

Sistema que calienta la cama antes de recibir al neonato, cuna lista para cesáreas programadas.

- **Beneficio:** El recién nacido llega a ambiente térmico neutral, reduciendo estrés por frío en primeros minutos de vida.

SISTEMA DE ALARMAS

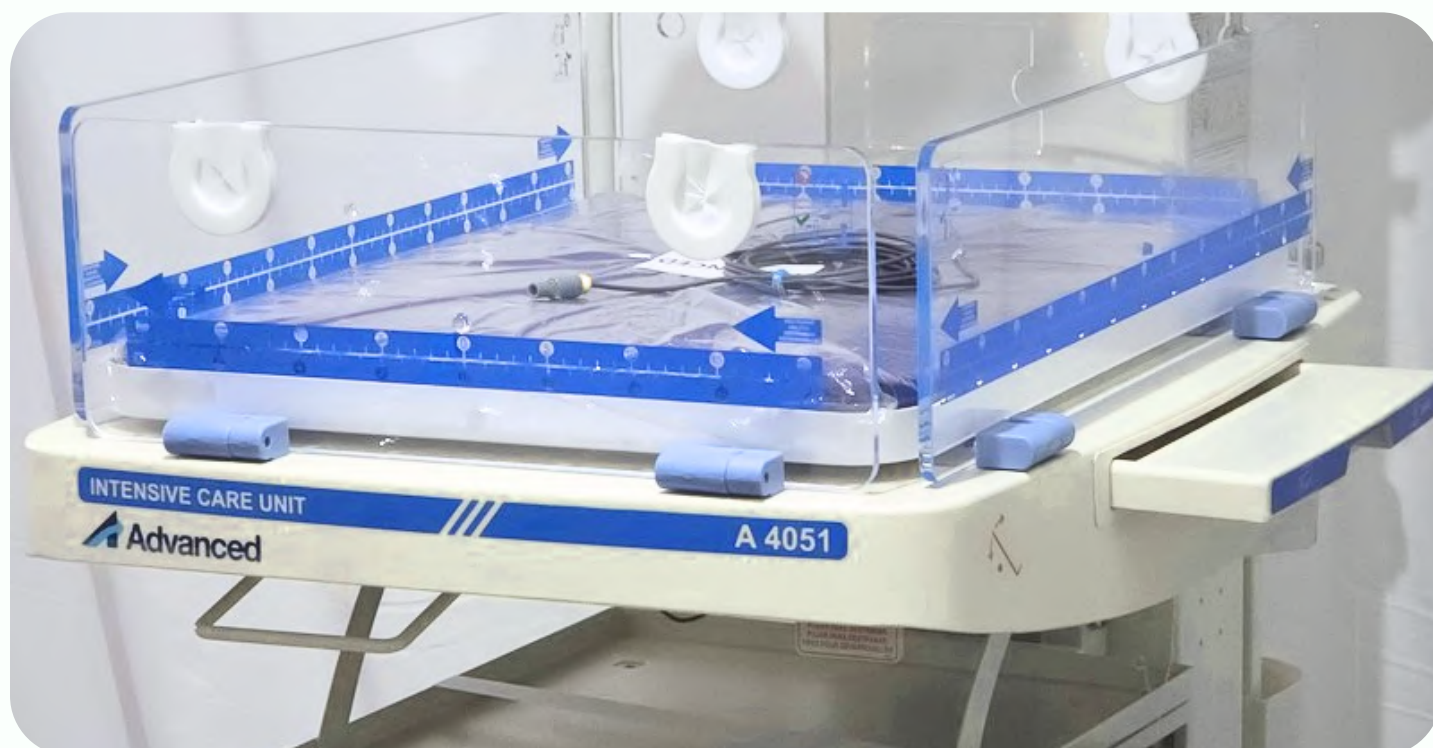

Detección temprana de desviaciones térmicas o fallas del equipo, permitiendo intervención oportuna antes de complicaciones.

✓ ALARMAS TÉRMICAS

- Alta temperatura: $+1.0^{\circ}\text{C}$ sobre punto de ajuste.
- Baja temperatura: -1.0°C bajo punto de ajuste.

✓ ALARMAS DE EQUIPO

- Falla del calentador radiante.
- Falla de sonda cutánea (despegada/dañada).
- Falla del sistema.

✓ ALARMAS ELÉCTRICAS

- Falla de energía eléctrica AC.

INCLUYE

● Sistema de calentamiento

- Reflector radiante articulable $\pm 90^\circ$ (acceso para RX).
- Charola bypass integrada para estudios radiológicos.

● Cama del paciente

- Cama manual Trendelenburg/Anti-Trendelenburg.
- 7 posiciones de inclinación.
- Protectores laterales de acrílico plegables.
- Altura de colchón 1000mm (ergonómica).

● Movilidad

- 4 ruedas de 5" con sistema de frenos.



INCLUYE

● Panel de gases médicos

- Toma de oxígeno: rosca 9/16"-18UNF.
- Toma de aire medicinal: rosca 3/4"-16UNF.
- Flujómetros de O₂ y Aire.
- Sistema de aspiración integrado.
- Resucitador manual (bolsa de ventilación).

● Iluminación y accesorios

- Sistema de iluminación LED auxiliar (procedimientos).
- Contador APGAR + Reloj.
- Poste para soluciones IV.
- Charola accesoria inferior con 2 cajones.
- 2 soportes para cilindros tipo E (O₂/Aire respaldo).
- 3 ganchos guía-cables/bolsas colectoras.



CERTIFICADOS



ISO 13485
ISO 9001



FDA



COFEPRIS



CE

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

222 240 9980

222 211 6113

222 240 2687

ventas@deltamedic.com

