


INCUBADORA DE TRASLADO

A-3158

EQUIPOS Y SUMINISTROS DE NEONATOLOGÍA

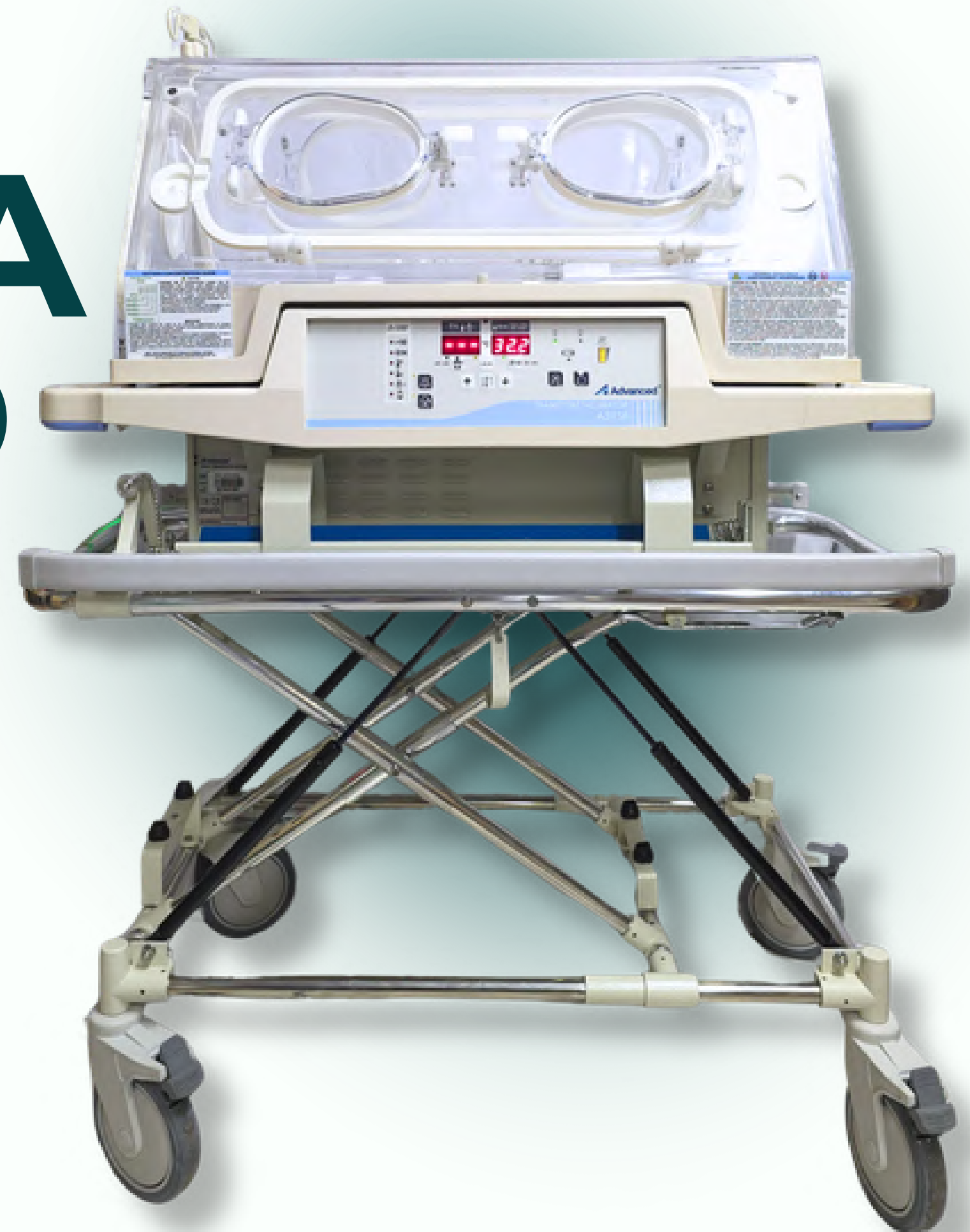

DESCRIPCIÓN

EQUIPO CON CÚPULA RÍGIDA QUE OFRECE UN ENTORNO CERRADO, TEMPLADO Y MICROFILTRADO. FUNCIONA CON RED ELÉCTRICA, 2 BATERÍAS CON 4 HORAS DE AUTONOMÍA Y CORRIENTE DC PARA TRASLADOS AÉREOS O TERRESTRES.





MOVILIDAD Y TRANSPORTE

- ✓ Carro X
- ✓ Estructura robusta
- ✓ Cúpula rígida de doble pared acrílica
 - Aísla al paciente de las vibraciones.
- ✓ Base rodable colapsable
 - 3 posiciones: 88-120cm
- ✓ Ingreso fácil y rápido a ambulancias
 - Terrestres y aéreas, sin descuidar el confort.
- ✓ Ruedas con frenos

ACCESO AL PACIENTE Y GASES

Acceso perimetral

3 puertas + 4 trampillas para procedimientos médicos simultáneos.

Lecho deslizable

Bandeja se desliza fuera de la cúpula hasta 24cm para intervención rápida sin mover al neonato.

Gestión de gases

Conexiones, soportes e indicadores para administración precisa de oxígeno y aire en traslado.

MODOS Y LIMPIEZA

Modo Piel

Ajuste térmico según la temperatura real del neonato de 30°C a 38°C.

Modo Aire

Control de temperatura ambiental de 20°C a 37°C.
(Con tecla >37°C hasta 39°C.)

Limpieza

Paredes lisas, cúpula desmontable y materiales de grado médico resistentes a desinfectantes hospitalarios, evitando opacidad y reduciendo infecciones cruzadas.

*No usar cloro ni alcohol, solo detergente neutro.

ALARMAS Y SEGURIDAD

Sistema inteligente de alertas visuales y sonoras en el panel LED:

✓ **Fallos en el flujo de aire**

✓ **Discrepancias en la temperatura**

✓ **Servocontrol aire/piel**

- **Reacciona inmediatamente ante cualquier cambio térmico, previene riesgos de hipotermia y sobrecalentamiento.**



INCLUYE

- 4 pasatubos
- 2 pasadores de silicona
- Cargador de coche
- Poste IV con 2 ganchos
- Sensor de temperatura
- Voltimetro
- Luz auxiliar LED

+ ADICIONALES

- Blender
- Estante auxiliar
- Almohada para RN
- Resucitador BabyPuff



CERTIFICADOS



ISO 13485



FDA



**2 años de
garantía contra
defectos de
fábrica**

Contáctanos

www.deltamedic.com/

Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.115

Col. Gabriel Pastor 2da Sección.

C.P. 72425

Puebla, Pue.

(222) 240 - 9980

(222) 211 - 6113

(222) 240 - 2687

ventas@deltamedic.com

